

汎用超音波画像診断装置

ECHO PRO



いつでも、どこでも、
高品質なイメージングを実現。



デュアルプローブ設計



カラードプラ対応



穿刺機能搭載



ワイヤレス充電



高精細イメージング





エコプロ F2

コンベックス／リニア／フェーズドアレイ
(セクタ走査) 3 in 1

フェーズドアレイ (セクタ走査) はビームの制御が柔軟、高精度なため、肋間からのアプローチに優れており、コンベックスプローブを使用して心エコーも確認できます。腹部・血管・心臓・整形領域など、幅広く対応可能。

搭載機能

- ☒ コンベックス／リニア／フェーズドアレイ (セクタ走査)
- ☒ B・BM/カラー/パワードブラ/パルスドブラ
- ☒ 各種計測/容積計測
- ☒ 穿刺ガイド
- ☒ 2画面表示 (iPadのみで表示可能)
- ☒ 領域別のプリセット
- ☒ 防水・粉塵性：IPX5

製品仕様

販売名	エコプロ F2
一般的名称	汎用超音波画像診断装置
類別	理学診療用器具
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	第307AKBZX00050000号
特定保守管理医療機器	該当
コンベックス	3.2-5MHz
リニア	7.5-10MHz
フェーズドアレイ	2.5MHz - 5.0MHz
エレメント数	192Element
ゲイン範囲	40～110 (8段階)
サイズ	160mm×69mm×29mm (250g)
バッテリー駆動時間	2時間

スキャン深度

コンベックス	90/160/220/305mm
リニア	20/40/60/80mm
フェーズドアレイ	90/120/140/160mm



エコプロ F5

コンベックス／リニア

ECHO PRO F5は、コンベックスプローブとリニアプローブを一体化ポータブルワイヤレス超音波画像診断装置です。先進的な電子アレイスキャン技術を採用し、Bモード、カラードプラ、PWDプラなど多彩な画像モードに対応しています。

搭載機能

- ☒ コンベックス／リニア
- ☒ B・BM/カラー/パワードブラ/パルスドブラ
- ☒ 各種計測/容積計測
- ☒ 穿刺ガイド
- ☒ 2画面表示 (iPadのみで表示可能)
- ☒ 領域別のプリセット
- ☒ 防水・粉塵性：IPX5

製品仕様

販売名	エコプロ F5
一般的名称	汎用超音波画像診断装置
類別	理学診療用器具
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	第307AKBZX00050000号
特定保守管理医療機器	該当
コンベックス	3.2-5MHz
リニア	7.5-10MHz
エレメント数	192Element
ゲイン範囲	40～110 (8段階)
サイズ	160mm×69mm×29mm (250g)
バッテリー駆動時間	2時間

スキャン深度

コンベックス	90/160/220/305mm
リニア	20/40/60/80mm



エコプロ F1 コンベックス

F1は深部組織の観察に適したワイヤレスコンベックス超音波プローブです。腹部、産婦人科、救急医療など幅広い診療領域に対応し、高画質なカラードプラインメージングと優れた携帯性を実現します。

搭載機能

- ☒ コンベックスプローブ (3.2MHz / 5.0MHz)
- ☒ B・BM/カラー/パワードブラ/パルスドブラ
- ☒ 各種計測/容積計測
- ☒ 穿刺ガイド
- ☒ 2画面表示 (iPadのみで表示可能)
- ☒ 領域別のプリセット
- ☒ 防水・粉塵性：IPX5

製品仕様

販売名	エコプロ F1
一般的名称	汎用超音波画像診断装置
類別	理学診療用器具
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	第307AKBZX00050000号
特定保守管理医療機器	該当
コンベックス	3.2-5MHz
表示モード	B、B/M、Color、PW、PDI
エレメント数	192Element
ゲイン範囲	40～110 (8段階)
サイズ	160mm×70mm×28mm (250 g)
バッテリー駆動時間	3時間

スキャン深度

リニア	20/40/60/80mm
-----	---------------



エコプロ F6 リニア

F6は浅部組織、血管、筋骨格系および穿刺ガイド用途に最適なワイヤレスリニア超音波プローブです。高周波リニアアレイにより高解像度画像を提供し、血管評価やインターベンション支援に優れた性能を発揮します。

搭載機能

- ☒ リニアプローブ (7.5MHz / 10MHz)
- ☒ B・BM/カラー/パワードブラ/パルスドブラ
- ☒ 各種計測/容積計測
- ☒ 穿刺ガイド
- ☒ 2画面表示 (iPadのみで表示可能)
- ☒ 領域別のプリセット
- ☒ 防水・粉塵性：IPX5


製品仕様

販売名	エコプロ F6
一般的名称	汎用超音波画像診断装置
類別	理学診療用器具
医療機器分類	管理医療機器
医療機器認証番号	第307AKBZX00050000号
特定保守管理医療機器	該当
リニア	7.5-10MHz
表示モード	B、B/M、Color、PW、PDI
エレメント数	192Element
ゲイン範囲	40～110 (8段階)
サイズ	160mm×70mm×28mm (250 g)
バッテリー駆動時間	3時間


スキャン深度

コンベックス	90/160/220/305mm
--------	------------------

描出画像例

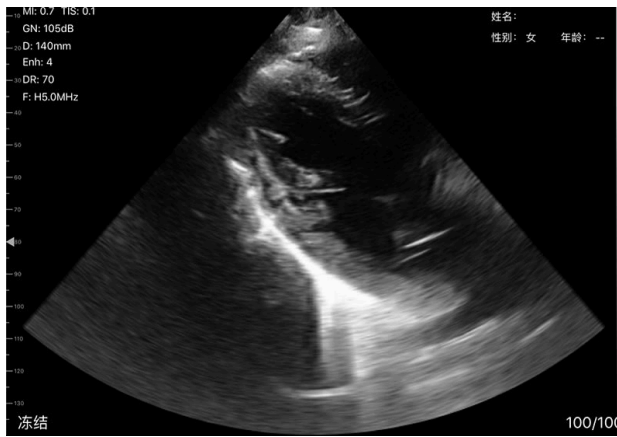


心臓(フェーズドアレイ)

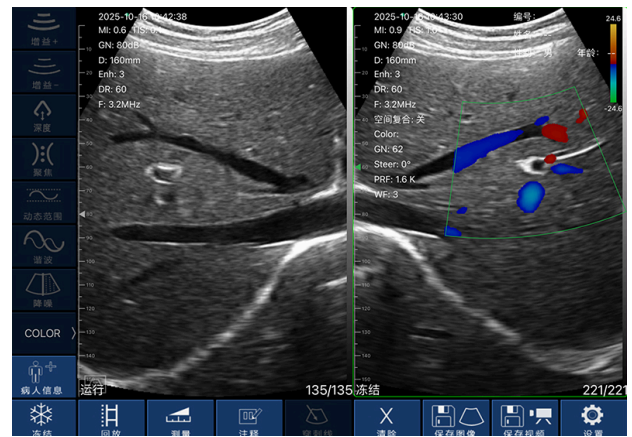

肝臓 (2画面表示)



腎臓 (Bモード)

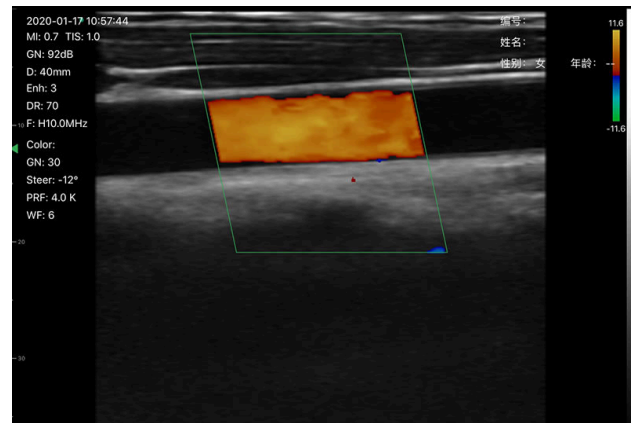

頸動脈 (カラードプラ)

同梱品

(以下すべての同梱品が揃っていることを確認します。)



プローブ



USBケーブル



ワイヤレス充電器



ケース

FUJITSU MEDICAL SERVICE

株式会社富士メディカルサービス

〒123-0863 東京都足立区谷在家1-19-7

URL: <https://www.fuji-medicalservice.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

受付時間：9時~17時(平日)
※土日祝を除く

■ 電話でのお問い合わせ


03-6338-9687

■ メールでのお問い合わせ

info@fuji-medicalservice.co.jp

富士メディカルサービス
公式サイトはこちら

公式サイトでは、製品の描出画像
ギャラリーや使い方ガイドを説明した
ガイドをご覧ください。

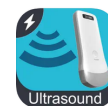

ECHO PRO
専用アプリ (iOS)

※表示器はiOSのスマートフォン、
タブレットをご用意ください
※動作環境：iOS 12.0以上またはiPad
OS12.0以上

※Androidでは動作を保証していません

